


РЕЛАКС

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

Инструкция
по эксплуатации

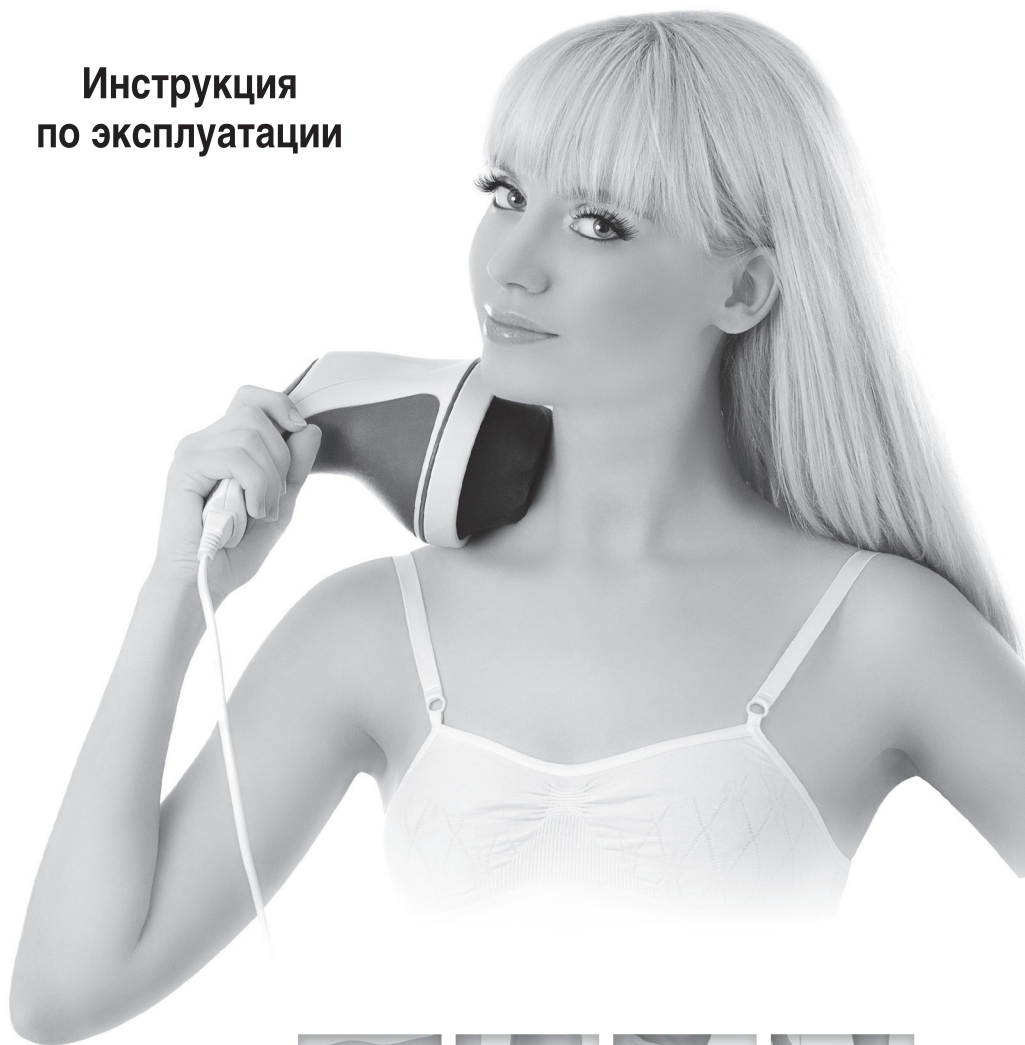

BRADEx[™]
Beauty & Health





Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией!

Массажер для тела «РЕЛАКС» – это простое в использовании и эффективное устройство, помогающее привести в идеальную форму живот, бедра, ягодицы, ноги и руки. Необыкновенная вибрационная система этого устройства воздействует на глубокие слои кожи, расщепляет нежелательные жировые клетки, а также сжигает калории.

Также массажер «РЕЛАКС» обеспечивает тренировку всего тела без каких-либо упражнений. Просто приложите его к той зоне тела, которую требуется улучшить и подтянуть, и он поможет избавиться от лишнего жира и целлюлита.

Секрет кроется в уникальной конструкции – благодаря ей массажер вибрирует со скоростью до 2500 оборотов в минуту, за счет такого воздействия и достигается эффект сжигания лишних жировых отложений.

Уникальные свойства: убирает некрасивые жировые складки, формирует красивую и сексуальную фигуру, избавляет от целлюлита. Достаточно лишь 10 минут в день! Помимо этого массирует ноги и ступни.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Портативность и легкость использования
- Высокая скорость вращения - до 2500 оборотов в минуту
- Удобная прорезиненная ручка
- Регулировка скорости вращения
- 4 насадки для различного воздействия на тело + защитная насадка для волос с сеточкой
- Придает мышцам тонус, снимает мышечное напряжение

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА



- При наличии каких-либо заболеваний или острых воспалительных процессов в теле проконсультируйтесь с врачом, прежде чем применять массажер.
- Противопоказания к применению: беременность, болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, физические травмы.
- Пользуйтесь прибором только через час после приема пищи.
- Не используйте прибор дольше 15 минут на одном участке тела.
- Не используйте прибор в области головы и горла.
- Не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37°C.
- Если во время использования массажера вы почувствуете тошноту, головокружение, боль в груди и прочие неприятные симптомы, немедленно прекратите использование массажера и обратитесь к врачу.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ МАССАЖЕРА

1. Массажёр
2. Защитная насадка
3. Волнистая насадка: для бедер, ягодиц, рук.
4. Роликовая насадка: для проведения массажа с использованием массажных масел, специальных антицеллюлитных лосьонов и пр.
5. Плоская насадка: для плеч, шеи, спины.
6. Шлифовальная насадка: для ухода за кожей пяток и избавления от мозолей.
7. Регулятор скорости вращения
8. Шнур питания 220 В.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА



Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы правильно и эффективно использовать прибор!

Установка/Замена насадки

1. Снимите защитную насадку (Шаг 1).
2. Нажмите на вогнутые части на основании вращающейся базы и снимите предустановленную насадку (Шаг 2).
3. Установите необходимую насадку, а также защитную насадку для волос с сеточкой, если это необходимо.

Использование

1. Подключите массажер к электросети.
2. Для включения массажера поверните регулятор скорости вращения по часовой стрелке. Если требуется увеличить скорость вращения, продолжайте крутить регулятор в том же направлении. Чтобы массажер работал медленнее, поверните регулятор скорости вращения против часовой стрелки.
3. Для достижения наилучшего результата и удобства пользования можно держать массажер двумя способами:
 - держите прибор за центральную часть (Шаг 3);
 - держите прибор за ручку (Шаг 4).
4. После использования поверните регулятор скорости вращения против часовой стрелки до щелчка, чтобы выключить массажер; отключите прибор от электросети.


Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3

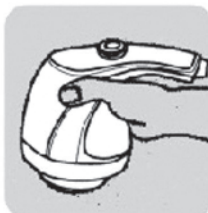

Шаг 4





ВНИМАНИЕ!

- Защитную насадку для волос с сеточкой можно использовать только с волнистой насадкой и плоской насадкой. Никогда не используйте защитную насадку с роликовой и шлифовальной насадками!
- Пользуйтесь прибором с защитной насадкой, если применяете его в области шеи и плеч.



ВОЗДЕЙСТВИЕ МАССАЖЕРА НА ТЕЛО

- Придает тонус мышцам предплечий и рук
- Облегчает напряжение, возникающее в плечах и спине
- Придает красивую форму животу, укрепляет мышцы талии
- Укрепляет мышцы ягодиц
- Делает ноги стройными, снимает напряжение и усталость
- Удаляет мозоли и делает кожу ног гладкой

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Если устройство не используется, то всегда отключайте его от электросети!
- Не допускайте попадания воды и иных жидкостей в устройство.
- Не поднимайте прибор за шнур и не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
- Для очищения прибора пользуйтесь мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством; перед очищением прибора всегда отключайте его от электросети!
- Гарантия действует при соблюдении инструкции и правильной эксплуатации прибора, срок гарантии уточняйте у Вашего продавца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация: массажёр, 1 защитная насадка для волос с сеточкой, 1 шлифовальная насадка (для ног), 1 роликовая насадка, 1 плоская насадка, 1 насадка с волнистой поверхностью, инструкция по применению.

Материал: пластик, металл, нейлон, абразив, резина.

Питание от сети: 220-250 В

Мощность: 18-35 Вт

Частота: 50 Гц

KZ 0060

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59; 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru. Импортер на территории Республики Беларусь: ТУП «BRADEX», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9 комн.34/4, УНП 192409754, email: optbel1@bradex.ru. Страна происхождения: Китай. Производитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937; факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com. Международная торговая марка «BRADEX». Пер. №1419183. Израиль - Пер. №204012. Россия - Пер. №444287, №683532.

ДАТУ ПРОИЗВОДСТВА СМОТРИТЕ НА УПАКОВКЕ

BRADEX
Beauty & Health

